


！ 培養開始にあたっての注意 ！

RCB1189 THP-1 は、通常の多くの細胞とは異なります。

- ・ 増殖が確認されるまで注意が必要です。
凍結融解直後は、細胞密度を高く保つ方が立ち上がりが良いです。
- ・ 融解時に生存細胞をカウントした場合、 3×10^5 cells/ml 程度で播種して下さい。
- ・ 翌日の培地交換は避け、
培養開始後、一週間程度は様子をご覧ください。

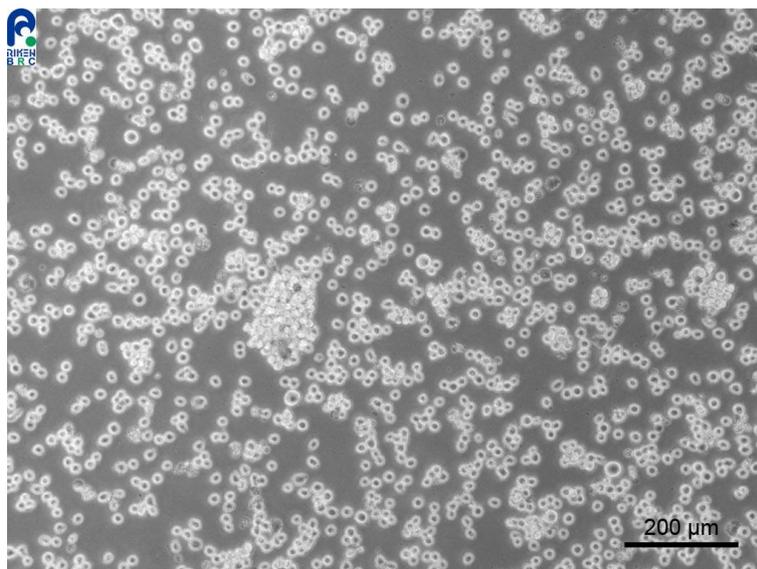

培養の開始にあたりましては、以上の点にご留意ください。

【お問い合わせ】 cellqa.brc@riken.jp